

MOVIVA® – De innovatieve, minimaal invasieve endoscopische oplossing voor gastric mucosal ablation (GMA) in de fundus. Het vermindert het hongergevoel van de patiënt en, in combinatie met ESG, kan GMA leiden tot gewichtsverlies dat vergelijkbaar is met dat van traditionele bariatrische chirurgie.



erbe
power your performance.



MOVIVA®
Turn down the food noise


Erbe Nederland B.V. · Velsenstraat 10 · 4251 LJ Werkendam · Netherlands · +31 183 509 755 · klantenservice.nl@erbegroup.com

JOIN US ON    

© Erbe Elektromedizin GmbH 2026 · 2026-05 · w · non-US only · Disclaimer


De innovatieve aanvulling op uw behandelings portfolio

GMA met MOVIVA® is een nieuwe, innovatieve procedure die zich richt op het hormonale mechanisme. Als minimaal invasieve aanvulling op het behandelingsaanbod biedt MOVIVA® ook een haalbaar alternatief voor patiënten die angst hebben voor de risico's van bariatrische chirurgische ingrepen.

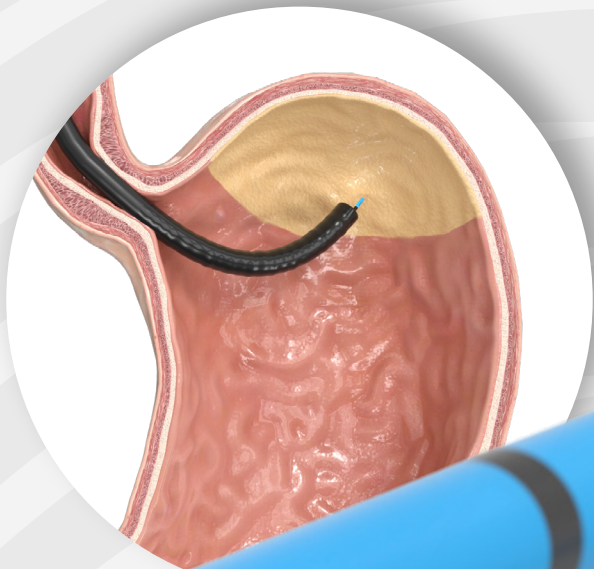

Technische gegevens

Aansluiting (type)	APC 3 Plug; Fluid Plug
Schachtdiameter sonde	2,4 mm
Lengte van de sondeschacht	1900 mm
Afmetingen (elektrode)	Uitstekende lengte 0,75 mm; Diameter 0,7 mm
Afmetingen (spuitmond)	120 µm
Max. elektrische belastbaarheid	5000 Vp
Single-use / re-usable product	Single-use

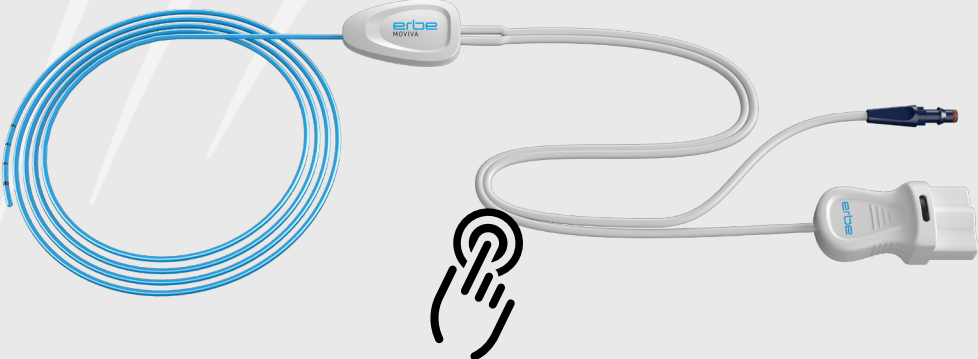

Honger aanpakken bij de bron

MOVIVA® helpt patiënten hun afslankprogramma vol te houden door het aantal ghreline-producerende cellen te verminderen via ablatie van de fundus mucosa. Hierdoor neemt het hongergevoel af. Tegelijkertijd zorgt de ablatie ervoor dat de fundus krimpt. Dit draagt bij aan een aanzienlijke vermindering van de eetlust, waardoor het gemakkelijker wordt om minder calorieën binnen te krijgen.

* so-called hunger hormone

Verbeter de resultaten met ESG

GMA kan worden uitgevoerd als een stand-alone behandeling of in combinatie met endoscopische sleeve-gastroplastiek (ESG). Door GMA te combineren met ESG wordt de efficiëntie verhoogd tot een niveau dat dicht bij dat van VSG (verticale sleeve-gastrectomie) ligt, met een minder invasieve procedure.

GMA alone:


7.7 % TBWL after 6 months
in early studies.*Maselli et al., 2024

7.7 % TBWL

≤ 24 % TBWL

GMA + ESG:

tot 24 % TBWL na 12 maanden,
met resultaten die in de buurt komen
van die van een chirurgische sleeve-
gastrectomie, maar met een veel minder
invasieve ingreep.*McGowan et al., 2025; Gadi et al., 2026

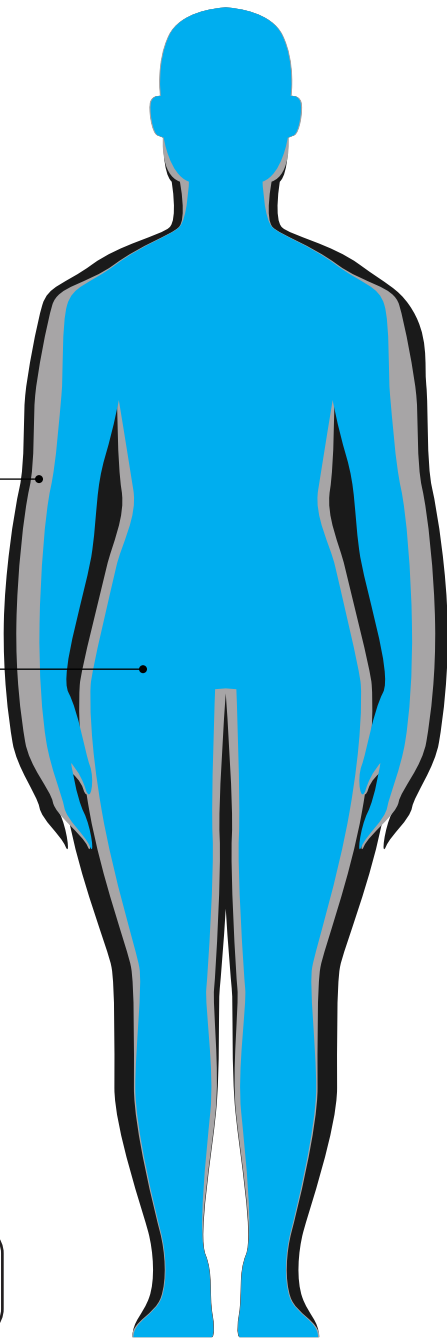

→ WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE OPVRAGEN

Hoe werkt GMA met MOVIVA®?

MOVIVA® is een geavanceerd hybride instrument dat speciaal is ontworpen voor GMA. Het combineert twee belangrijke functies in één product:


Injectie van vloeistof vormt een sub-mucosale beschermlaag die dieperliggende weefsellagen beschermt tegen thermische schade. Dit gebeurt met naaldvrije, hogedruk- en weefselselectieve hydrodissectie.

Oppervlakkige thermische ablatie van het slijmvlies met argonplasma-coagulatie. MOVIVA® is uitgerust met de speciale moveAPD®-modus, die een brede en consistente APC-behandeling biedt.

Stap voor stap



Markering

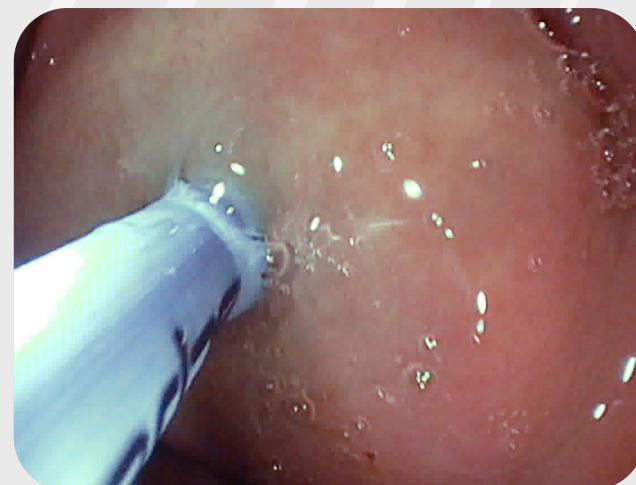

Lifting



Ablatie

Speciaal moveAPD®-modus: snelle en effectieve coagulatie

De **moveAPD®**-modus zorgt voor een uniform weefseleffect, grotendeels onafhankelijk van de afstand tussen het apparaat en het weefsel. Met behulp van MOVIVA® in combinatie met moveAPD® maakt een effectieve en snelle coagulatie mogelijk, zelfs van grote oppervlakken.

→ **BEZOEK DE WEBSITE VAN ONZE VIO® 3N-SERIE**



Verbeterde injectiemogelijkheden

Een ander sterk punt van MOVIVA® ligt in de verbeterde injectiemogelijkheden, met name in zijdelingse posities, die in endoscopische situaties vaak een uitdaging vormen.

→ **BEZOEK ONZE MOVIVA®-WEBSITE**

Begin uw behandeltraject met MOVIVA®

Het MOVIVA®-opleidingsprogramma is ontworpen om u op te leiden tot toekomstig toepassingsdeskundige, zodat u deze nieuwe behandelmethode in de klinische praktijk kunt implementeren. Wij bieden gerichte opleidingen aan. Deze zijn beschikbaar in verschillende landen en regio's.

→ **SCHRIJF U NU IN VOOR DE OPLEIDING**