

MOVIVA® – Innowacyjne, minimalnie inwazyjne rozwiązanie endoskopowe do ablacji błony śluzowej żołądka (GMA) w dnie żołądka.

Zmniejsza uczucie głodu u pacjenta, a w połączeniu z ESG, GMA może przynieść efekty utraty wagi porównywalne z tradycyjną chirurgią bariatryczną.

erbe
power your performance.

MOVIVA®
Zredukuj apetyt


Erbe Polska Sp. z o. o. · Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8 · PL-02-972 Warszawa · Poland · +48 22 642-25-26 · sales.pl@erbegroup.com

JOIN US ON




Innowacyjna procedura do portfolio zabiegowego

GMA z MOVIVA® to nowa, innowacyjna procedura, która koncentruje się na mechanizmie hormonalnym. Jako minimalnie inwazyjny dodatek do portfolio zabiegów, MOVIVA® stanowi również realną alternatywę dla pacjentów, którzy obawiają się skutków ubocznych i ryzyka związanego z bariatrycznymi interwencjami chirurgicznymi.

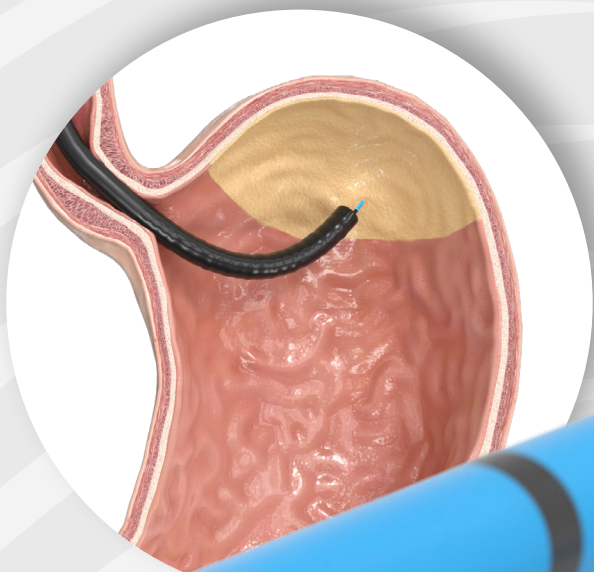

Dane techniczne

Typ przyłącza	Wtyczka APC3, złącze płynowe
Średnica trzonu sondy	2,4 mm
Długość trzonu sondy	1900 mm
Długość elektrod	Długość wystająca 0,7mm ; średnica 0,7mm
Wymiary (dyszy)	120 µm
Max. obciążenie elektryczne	5000 Vp
Produkt jednorazowego / wielorazowego użytku	Jednorazowy

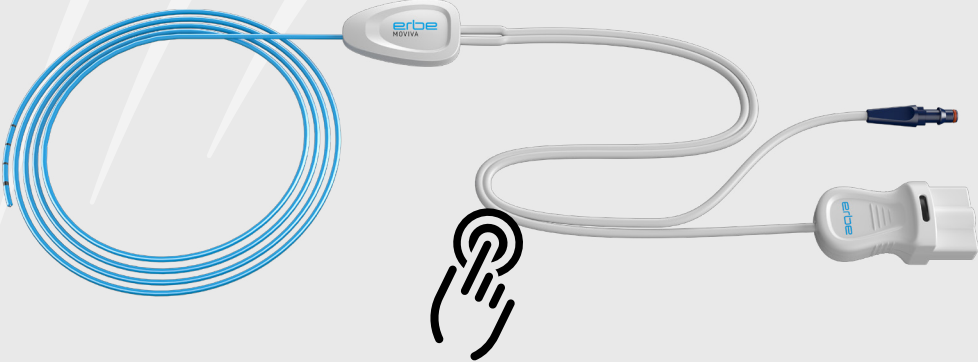

Działanie bezpośrednie na źródło głodu

MOVIVA® pomaga pacjentom konsekwentnie realizować plan odchudzania poprzez redukcję komórek produkujących grelinę* poprzez ablację błony śluzowej dna żołądka, co z kolei zmniejsza uczucie głodu. Jednocześnie ablacja prowadzi do kurczenia się dna żołądka. Przyczynia się to do znacznego zmniejszenia apetytu, co skutkuje spożywaniem mniejszej ilości kalorii.

* Tak zwany hormon głodu

Lepsze wyniki dzięki ESG

GMA może być wykonywana jako samodzielny zabieg lub w połączeniu z endoskopową gastroplastyką rękawową (ESG). Połączenie fundoplikacji GMA z ESG zwiększa skuteczność zbliżoną do VSG (delata pionowa rękawowa resekcja żołądka) przy mniejszej inwazyjności.

Samo GMA:


7.7 % TBWL po 6 miesiącach we wczesnych badaniach. *Maselli i in., 2024 r.

7.7 % TBWL

≤ 24 % TBWL

GMA + ESG:

do 24 % TBWL po 12 miesiącach, zbliżone do wyników chirurgicznej rękawowej resekcji żołądka, ale przy znacznie mniejszej inwazyjności. *McGowan i in., 2025 r.

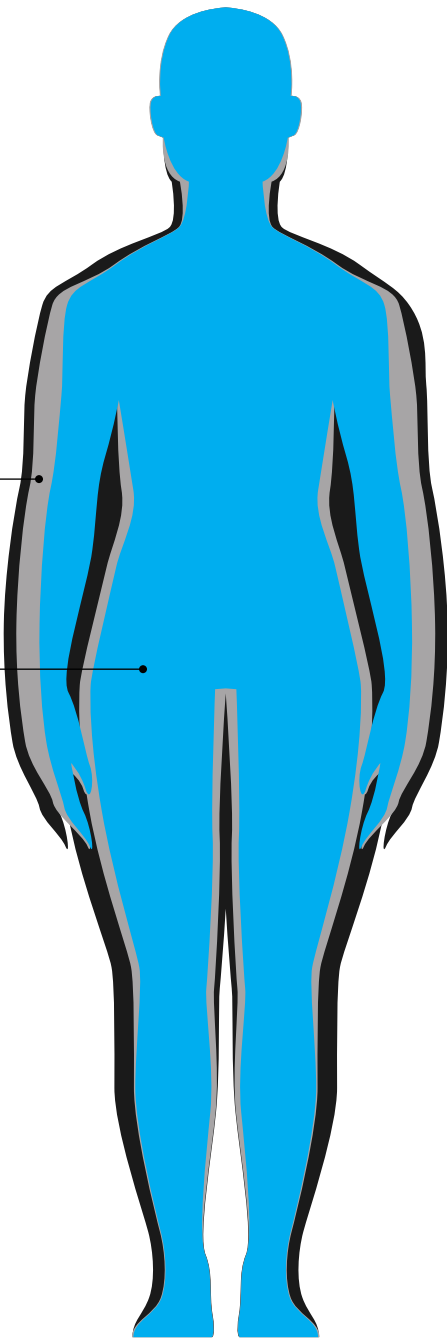

→ INFORMACJE NAUKOWE

W jaki sposób działa GMA w połączeniu z MOVIVA®?

MOVIVA® to zaawansowany instrument hybrydowy przeznaczony do GMA. Łączy w sobie dwie kluczowe funkcje w jednym produkcie:


Wstrzyknięcie płynu w celu utworzenia poduszki podśluzówkowej, która chroni głębsze warstwy tkanki przed urazami termicznymi. Odbywa się to za pomocą bezigłowej, wysokociśnieniowej i selektywnej hydrodysekcji tkanek.

Powierzchniowa ablacja termiczna błony śluzowej z użyciem koagulacji plazmą argonową (APC). MOVIVA® jest wyposażona w dedykowany tryb moveAPD®, zapewniający szeroką i równomierną koagulację APC.

Krok po kroku



Znakowanie

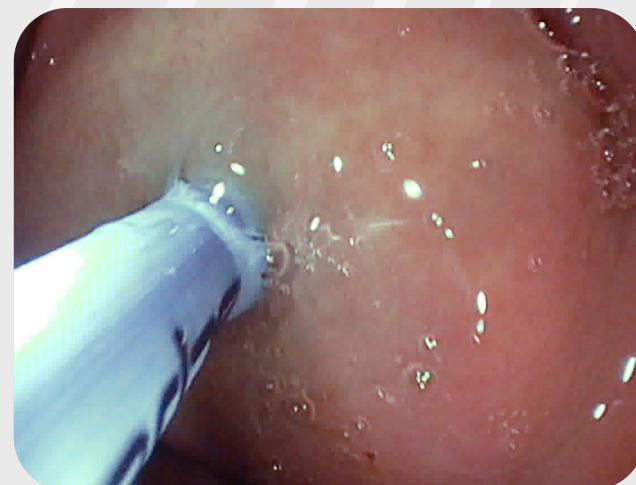

Uniesienie



Ablacja

Dedykowany tryb moveAPD®: Szybka i skuteczna koagulacja

Tryb moveAPD® zapewnia jednolity efekt tkankowy, w dużej mierze niezależny od odległości między urządzeniem a tkanką. Korzystanie z MOVIVA® z moveAPD® umożliwia skuteczną i szybką koagulację nawet dużych obszarów.

→ **ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ RODZINY VIO® 3n**



Ulepszona / zwiększona możliwości iniekcji

Kolejną zaletą MOVIVA® jest zwiększona możliwości iniekcji, szczególnie w pozycjach stycznych, które często stanowią wyzwanie w warunkach endoskopowych.

→ **ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ MOVIVA®**

Rozpocznij swoją kliniczną podróż z MOVIVA® już dziś

Program szkoleniowy MOVIVA® ma na celu przygotowanie Cię do roli przyszłego eksperta aplikacyjnego, umożliwiając wdrożenie tej nowej metody leczenia w praktyce klinicznej. Oferujemy specjalistyczne, dedykowane kursy szkoleniowe dostępne w wielu krajach i regionach – znajdź szkolenie najbliżej siebie.

→ **ZAREZERWUJ SWÓJ KURS JUŻ TERAZ**