

MOVIVA® - La innovadora solución endoscópica mínimamente invasiva para la ablación de la mucosa gástrica (GMA) en el fundus. Reduce la sensación de hambre del paciente y, cuando se combina con ESG, la GMA puede producir resultados de pérdida de peso comparables a los de la cirugía bariátrica tradicional.



erbe
power your performance.



MOVIVA®
Reduzca el "ruido"
de sensación
de hambre

Erbe España Soluciones Médicas S.L.U. · Santa Leonor 65, edificio B Bajo Izq · 28037 Madrid · España · +34 919 26 71 · info.es@erbegroup.com

JOIN US ON    

© Erbe Elektromedizin GmbH 2026 · 2026-05 · D360918 · non-US only · Disclaimer


La innovadora incorporación a su cartera de tratamientos

GMA con MOVIVA® es un procedimiento nuevo e innovador que se centra en el mecanismo hormonal. Como adición mínimamente invasiva a la cartera de tratamientos, MOVIVA® también proporciona una alternativa viable para los pacientes que temen los efectos secundarios y los riesgos de las intervenciones quirúrgicas bariátricas.



Datos técnicos

Conexión (tipo)	Enchufe APC 3; Enchufe para fluidos
Diámetro de la sonda	2,4 mm
Longitud del vástago de la sonda	1900 mm
Dimensiones (electrodo)	Longitud saliente 0,75 mm; Diámetro 0,7 mm
Dimensiones (boquilla)	120 µm
Capacidad de carga eléctrica máx.	5000 Vp
Producto de un solo uso/reutilizable	Un solo uso

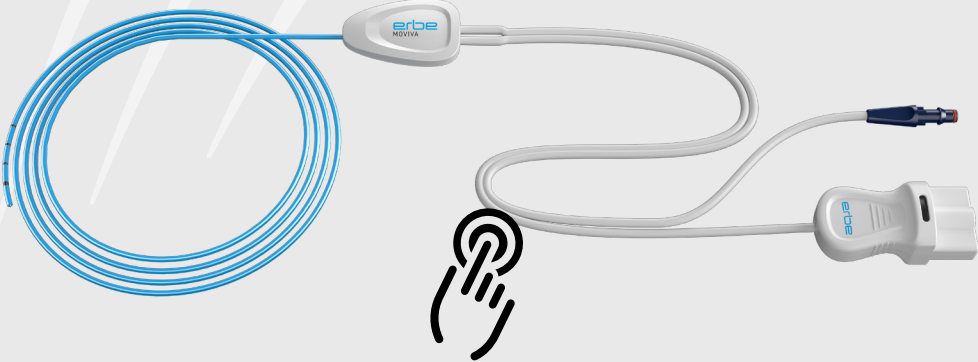

Atacar el hambre en su origen

MOVIVA® ayuda a los pacientes a seguir su plan de adelgazamiento reduciendo las células productoras de grelina* mediante la ablación de la mucosa del fondo uterino, lo que a su vez reduce su sensación de hambre. Al mismo tiempo, la ablación conduce a una reducción del fundus. Esto contribuye a una reducción significativa del apetito, facilitando el consumo de menos calorías.

* La llamada hormona del

Mejorar los resultados con la AMG

La AMG puede realizarse como tratamiento independiente o combinada con la gastroplastia endoscópica en manga (ESG). La combinación de la GMA fundal con la ESG aumenta la eficacia hasta aproximarse a la VSG (gastrectomía vertical en manga) con menos invasividad.

GMA sola:


7.7 % TBWL después de 6 meses en los primeros estudios.*Maselli et al., 2024

7.7 % TBWL

≤ 24 % TBWL

GMA + ESG:

hasta un 24% TBWL después de 12 meses, aproximándose a los resultados de la gastrectomía quirúrgica en manga pero con mucha menos invasividad.*McGowan et al., 2025

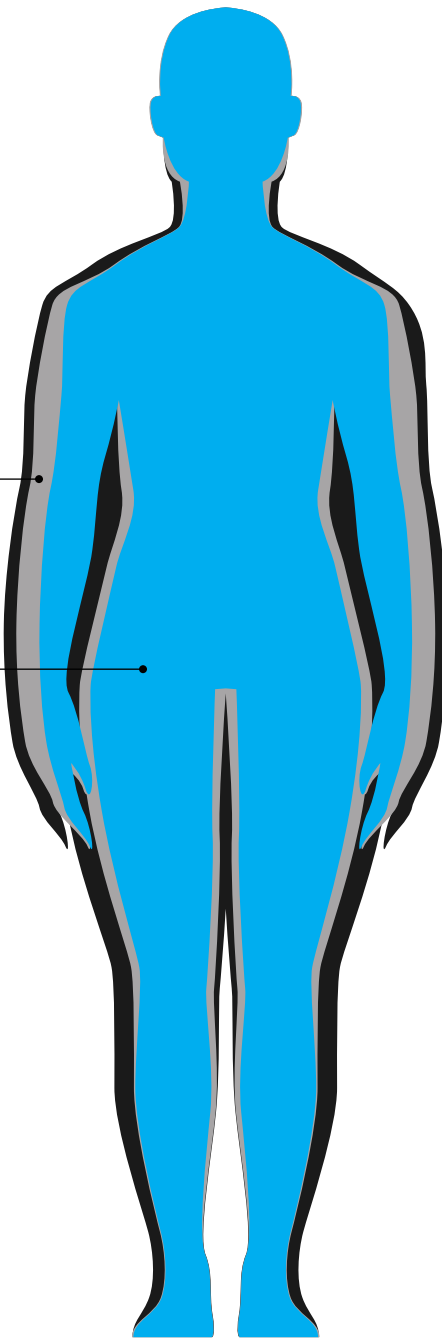

→ OBTENGA INFORMACIÓN CIENTÍFICA

¿Cómo funciona la GMA con MOVIVA® funciona?

MOVIVA® es un instrumento híbrido avanzado diseñado para la GMA. Combina dos funciones clave en un solo producto:


Inyección de líquido para formar un cojín submucoso que protege las capas más profundas del tejido de las lesiones térmicas. Esto se realiza mediante hidrodisección sin aguja, de alta presión y selectiva del tejido.

Ablación térmica superficial de la mucosa mediante coagulación con plasma de argón (APC). MOVIVA® está equipado con el sistema dedicado moveAPD® modo, la entrega de APC amplia y consistente.

Paso a paso



Marcaje

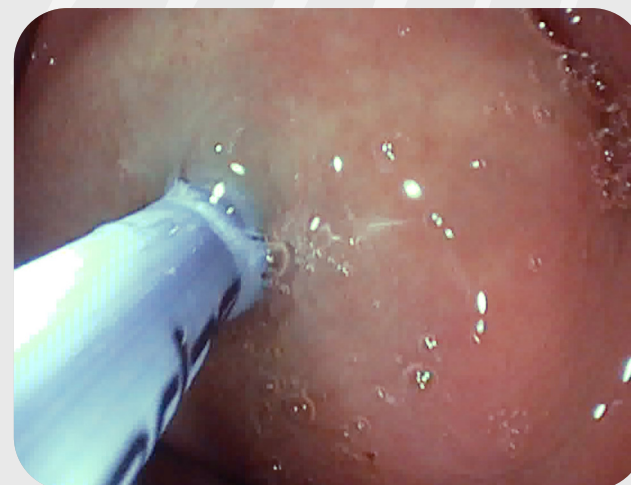

Elevación



Ablación

Dedicado MOVIVA® dedicado: Coagulación rápida y eficaz

El moveAPD® garantiza un efecto tisular uniforme, en gran medida independiente de la distancia entre el dispositivo y el tejido. Con MOVIVA® con moveAPD® permite una coagulación eficaz y rápida, incluso de grandes áreas.

→ VISITE NUESTRO SITIO WEB DE LA FAMILIA VIO® 3n



Capacidad de inyección mejorada

Otro punto fuerte de MOVIVA® radica en sus capacidades de inyección mejoradas, especialmente en posiciones tangenciales, que a menudo suponen un reto en entornos endoscópicos.

→ VISITE NUESTRO SITIO WEB MOVIVA®

Comience su viaje clínico con MOVIVA® hoy mismo

El MOVIVA® está diseñado para cualificarle como futuro experto en la aplicación, permitiéndole implementar este nuevo método de tratamiento en la práctica clínica. Ofrecemos cursos de formación específicos. Están disponibles en varios países y regiones - encuentre uno cerca de usted.

→ RESERVE SU CURSO AHORA