

MOVIVA® - La solution endoscopique innovante et mini invasive pour l'ablation de la muqueuse gastrique (GMA) dans le fundus. Elle réduit la sensation de faim du patient et, lorsqu'elle est associée à l'ESG, l'ablation de la muqueuse gastrique peut donner des résultats de perte de poids comparables à ceux de la chirurgie bariatrique traditionnelle.





power your performance.



MOVIVA®
Réduire les envies
alimentaires


Erbe Medical SARL · Z.A.C. Sans Souci · 470 Allée des Hêtres · France · +33 4 78 64 92 55 · erbe.fr@erbegroup.com

JOIN US ON    

© Erbe Elektromedizin GmbH 2026 · 2026-05 · D363528 · non-US only · Disclaimer


Une innovation pour enrichir votre offre thérapeutique

La GMA avec MOVIVA® est une nouvelle procédure innovante ciblant les mécanismes hormonaux de la faim. Cette approche mini-invasive enrichit les options de prise en charge de l'obésité et offre une alternative pertinente aux patients qui hésitent à recourir à la chirurgie bariatrique en raison des risques et des effets secondaires potentiels.

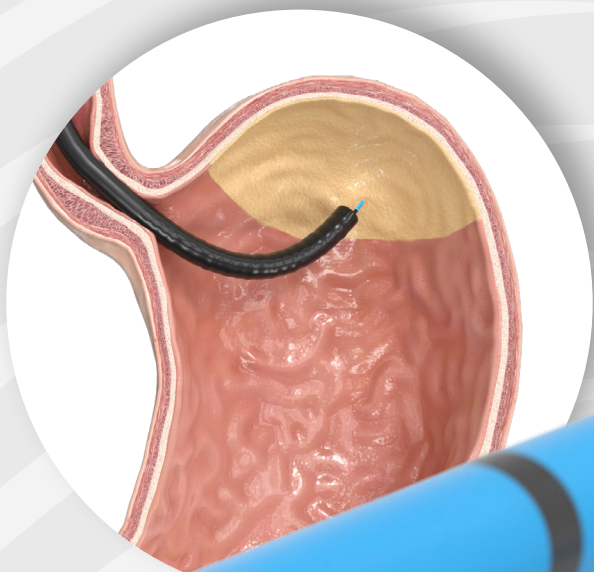

Données techniques

Connexion (type)	APC 3 Plug ; Fluid Plug
Diamètre de la tige de la sonde	2,4 mm
Longueur de la tige de la sonde	1900 mm
Dimensions (électrode)	Longueur saillante 0,75 mm ; Diamètre 0,7 mm
Dimensions (buse)	120 µm
Capacité de charge électrique maximale	5000 Vp
Produit à usage unique/réutilisable	Usage unique

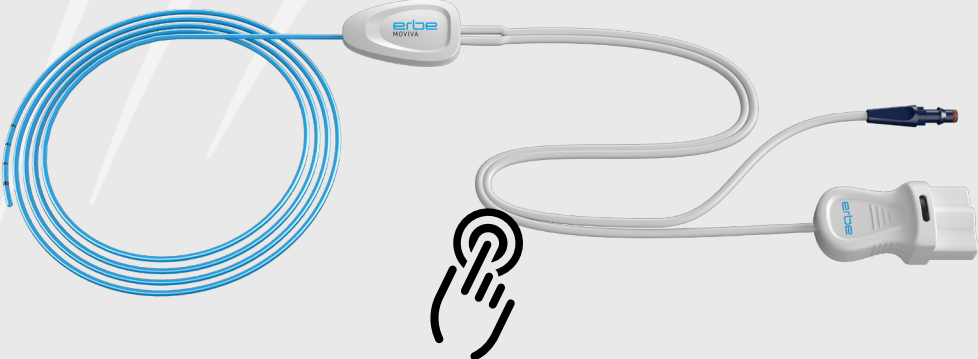

Cibler la faim à la source

MOVIVA® accompagne les patients dans leur parcours de perte de poids en ciblant les cellules productrices de ghréline par l'ablation de la muqueuse du fundus gastrique, réduisant ainsi la sensation de faim. Dans le même temps, l'intervention provoque une diminution du volume du fundus, contribuant à une baisse significative de l'appétit et facilitant l'adoption d'une alimentation moins calorique.*

* L'hormone de la faim

Améliorer les résultats grâce à la GMA

La GMA peut être proposée comme traitement autonome ou associée à une gastroplastie endoscopique (ESG). La combinaison de la GMA du fundus et de l'ESG permet d'atteindre des résultats de perte de poids proches de ceux de la sleeve gastrectomie verticale (SGV), avec une invasivité considérablement réduite.

GMA seule :


7.7 % TBWL après 6 mois dans les premières études.*Maselli et al, 2024

7.7 % TBWL

≤ 24 % TBWL

GMA + ESG :

jusqu'à 24 % TBWL après 12 mois, se rapprochant des résultats de la sleeve gastrectomie chirurgicale, mais avec une invasivité bien moindre.*McGowan et al, 2025

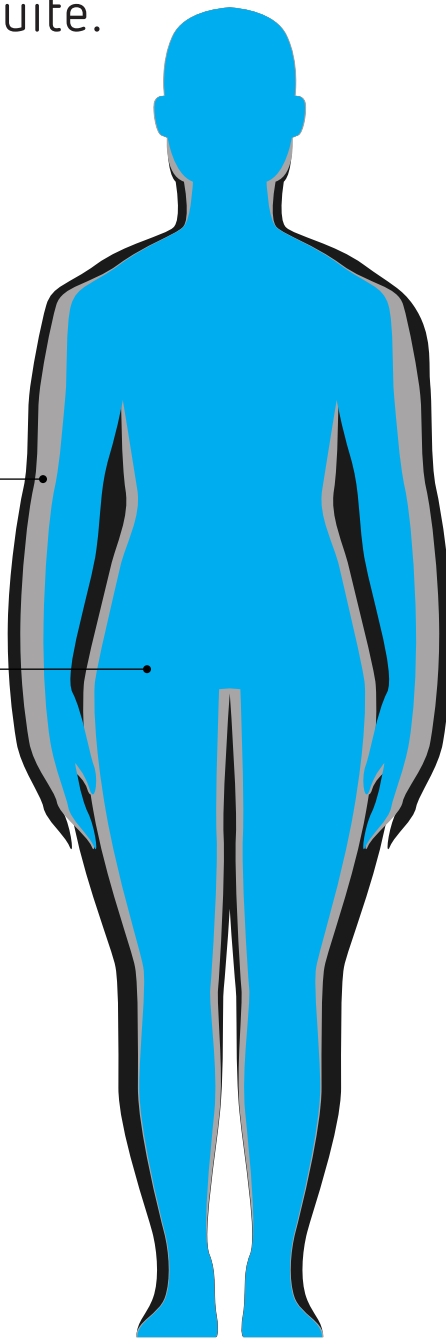

→ **OBTENIR DES INFORMATIONS SCIENTIFIQUES**

Comment la GMA avec MOVIVA® fonctionne-t-il ?

MOVIVA® est un instrument hybride avancé conçu pour la GMA. Il combine deux fonctions clés en un seul produit :


Injection de liquide pour former un coussin sous-muqueux qui protège les couches tissulaires plus profondes des lésions thermiques. Cette opération est réalisée par hydrodissection sans aiguille, à haute pression et sélective pour les tissus.

Ablation thermique superficielle de la muqueuse réalisée par coagulation au plasma d'argon (APC). Le dispositif MOVIVA® intègre le mode spécifique moveAPD®, conçu pour délivrer un plasma d'argon étendu et uniforme sur l'ensemble de la zone traitée.

Pas à pas



Marquage

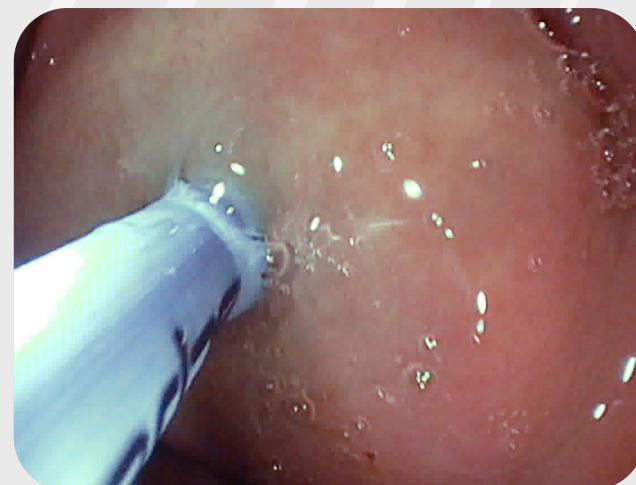

Élévation



Ablation

Le moveAPD® : Coagulation rapide et efficace

Le mode **moveAPD®** garantit un effet tissulaire uniforme, largement indépendant de la distance entre l'instrument et le tissu. En utilisant MOVIVA® avec moveAPD® permet une coagulation efficace et rapide, même sur de grandes surfaces.

→ VISITEZ LE SITE WEB DE LA FAMILLE VIO® 3n



Capacités d'injection améliorées

Un autre point fort de MOVIVA® réside dans ses capacités d'injection améliorées, en particulier dans les positions tangentielles, qui sont souvent difficiles dans les environnements endoscopiques.

→ VISITEZ NOTRE SITE MOVIVA

Commencez votre parcours clinique avec MOVIVA® dès aujourd'hui

Le programme de formation MOVIVA® vise à vous accompagner dans l'acquisition des compétences requises pour intégrer cette nouvelle méthode de traitement à votre pratique clinique. Des formations spécifiques sont proposées dans plusieurs pays et régions afin de faciliter votre accès à cette expertise.

→ RÉSERVEZ VOTRE COURS MAINTENANT