

MOVIVA® –
La soluzione
endoscopica
innovativa e
mininvasiva per
l'ablazione della
mucosa del fondo
gastrico (GMA).
Riduce il senso di
fame del paziente
e, se combinata
con la ESG, la GMA
può dare risultati
di perdita di peso
paragonabili alla
chirurgia bariatrica
tradizionale.



erbe
power your performance.



MOVIVA®
Turn down the food noise


Erbe Italia S.r.l. · Viale Sarca 336/F · 20126 Milano · Italy · +39 02 647468-1 · info.it@erbegroup.com

JOIN US ON    

© Erbe Elektromedizin GmbH 2026 2026-05 D363529 non-US only Disclaimer


La novità che espande la vostra gamma di trattamenti

GMA con MOVIVA® è una procedura innovativa che si concentra sul meccanismo ormonale. Come aggiunta mininvasiva alla gamma di trattamenti, MOVIVA® rappresenta una valida alternativa per i pazienti che temono gli effetti collaterali e i rischi degli interventi chirurgici bariatrici.

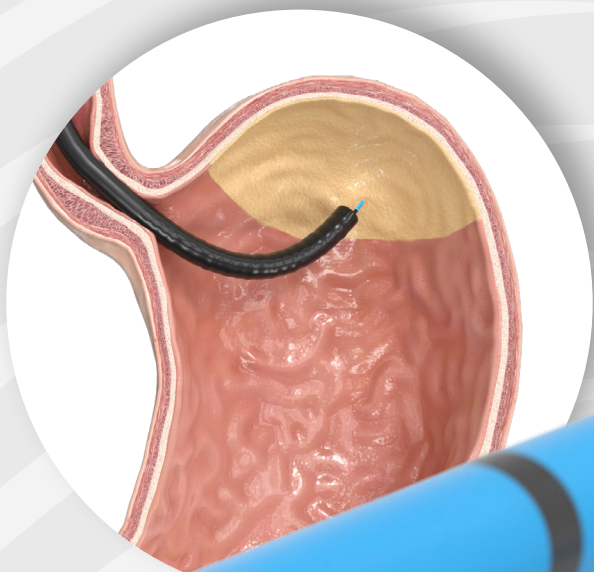

Dati tecnici

Connessione (tipo)	Connettore APC 3; Connettore per fluidi
Diametro della sonda	2,4 mm
Lunghezza della sonda	1900 mm
Dimensioni (elettrodo)	Lunghezza sporgente 0,75 mm; Diametro 0,7 mm
Dimensioni (ugello)	120 µm
Capacità di carico elettrico massima	5000 Vp
Prodotto monouso/riutilizzabile	Monouso

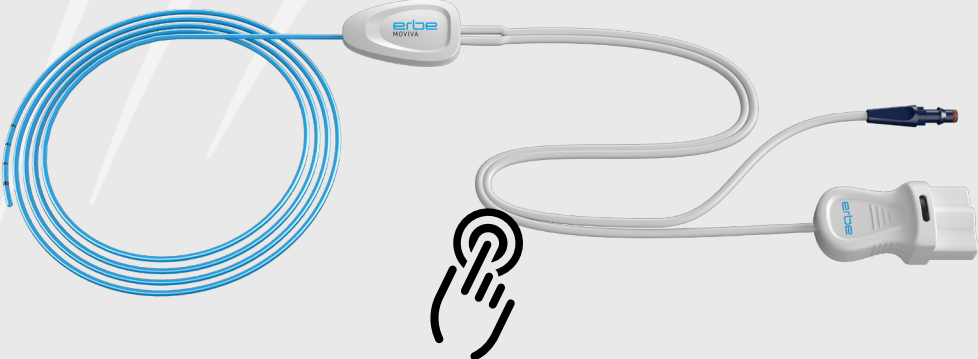

Intervenire sulla fame all'origine

MOVIVA® aiuta i pazienti a rispettare il loro percorso di perdita di peso, riducendo le cellule che producono grelina* attraverso l'ablazione della mucosa del fondo gastrico, che a sua volta attenua la sensazione di fame. Allo stesso tempo, l'ablazione porta al restringimento del fondo. Ciò contribuisce ad una significativa riduzione dell'appetito, rendendo più facile consumare meno calorie.

* l'ormone della fame

Migliorare i risultati con la GMA

La GMA può essere eseguita come trattamento a sé stante o combinata con la gastroplastica endoscopica (ESG). La combinazione della GMA del fondo con l'ESG ne aumenta l'efficacia a livelli vicini alla VSG (gastrectomia parziale verticale) con una minore invasività.

GMA da sola:


7.7 % TBWL dopo 6 mesi nei primi studi.*Maselli et al., 2024

7.7 % TBWL

≤ 24 % TBWL

GMA + ESG:

fino al 24 % TBWL dopo 12 mesi, avvicinandosi ai risultati della gastrectomia parziale chirurgica, ma con una minore invasività.*McGowan et al., 2025

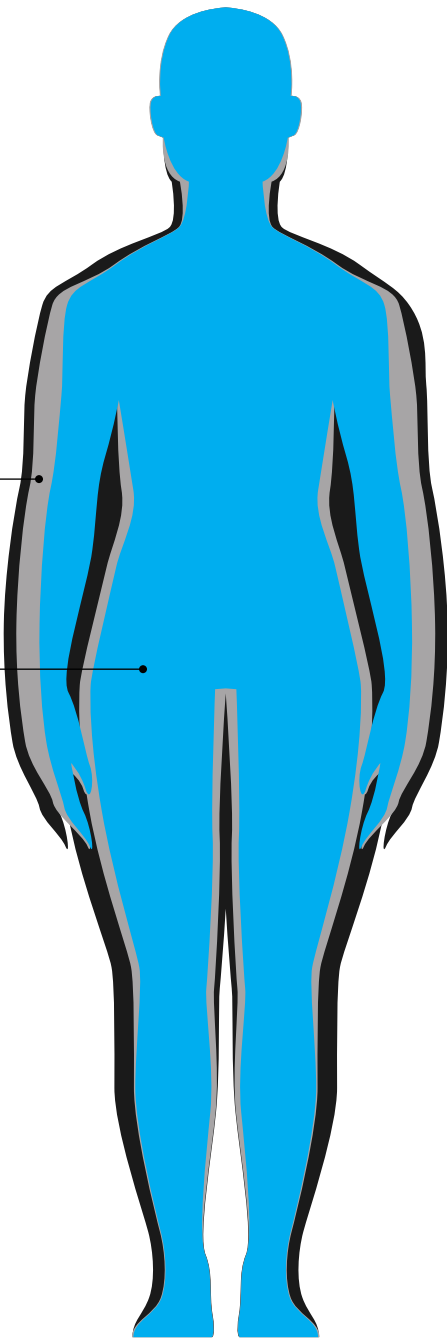

→ **ULTERIORI INFORMAZIONI SCIENTIFICHE**

Come funziona la GMA con MOVIVA®?

MOVIVA® è uno strumento ibrido avanzato, progettato per la GMA. Combina due funzioni chiave in un unico prodotto:


Sollevamento della mucosa per proteggere gli strati di tessuto più profondi dalle lesioni termiche. Operazione eseguita mediante idrodissezione senza ago, a pressione elevata e selettiva per i tessuti.

Ablazione termica superficiale della mucosa mediante coagulazione al plasma di argon (APC). MOVIVA® lavora con la modalità dedicata moveAPD®, che garantisce una coagulazione ampia e costante.

Passo dopo passo



Marcatura

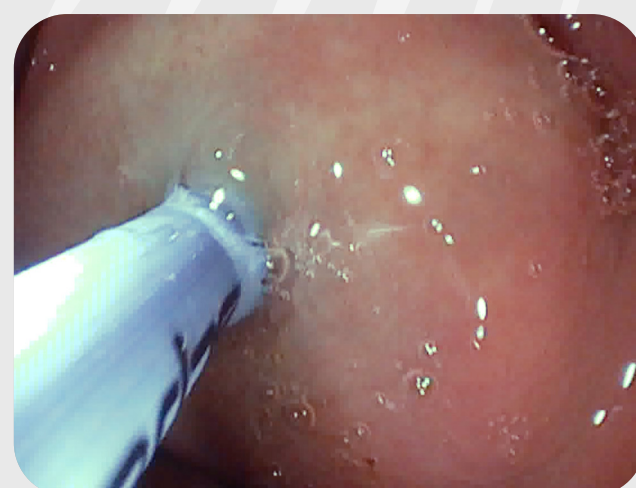

Sollevamento



Ablazione

Modalità dedicata moveAPD®: Coagulazione rapida ed efficace

La **modalità moveAPD®** garantisce un effetto tissutale uniforme, in gran parte indipendente dalla distanza tra il dispositivo e il tessuto stesso. L'utilizzo di MOVIVA® con moveAPD® consente una coagulazione efficace e rapida, anche su aree estese.

→ **VISITA IL SITO WEB DELLA FAMIGLIA VIO® 3n**



Capacità di iniezione migliorata

Un altro punto di forza di MOVIVA® è la capacità di iniezione migliorata, in particolare nelle posizioni tangenziali, spesso difficili da raggiungere in endoscopia.

→ **VISITATE IL NOSTRO SITO WEB MOVIVA®**

Iniziate il vostro percorso clinico con MOVIVA® oggi stesso

Il percorso di training con MOVIVA® è stato concepito per consentirvi di implementare questo nuovo metodo di trattamento nella pratica clinica. Offriamo corsi di formazione dedicati. Sono disponibili in diversi Paesi e regioni: trovatene uno vicino a voi.

→ **PRENOTA ORA IL TUO CORSO**