

MOVIVA® – Den innovativa, minimalt invasiva endoskopiska lösningen för ablation av magslemhinnan (GMA) i fundus. Den minskar patientens hunger och, i kombination med ESG, kan GMA ge viktminskningsresultat som är jämförbara med traditionell bariatrisk kirurgi.



erbe
power your performance.



MOVIVA®
Turn down the food noise


Erbe Sweden AB · Enebybergsvägen 1 · 618236 Danderyd · Stockholm · Sverige · +46 (0)8 442 88000 · info.se@erbegroup.com

JOIN US ON    

© Erbe Elektromedizin GmbH 2026 · 2026-05 · D372655 · non-US only · Disclaimer


Ett innovativt tillskott till ditt behandlingsutbud

GMA med MOVIVA® är en ny, innovativ metod som fokuserar på den hormonella mekanismen. Som ett minimalt invasivt tillskott till behandlingsutbudet är MOVIVA® ett genomförbart alternativ för patienter som fruktar biverkningarna och riskerna med bariatrisk kirurgi.

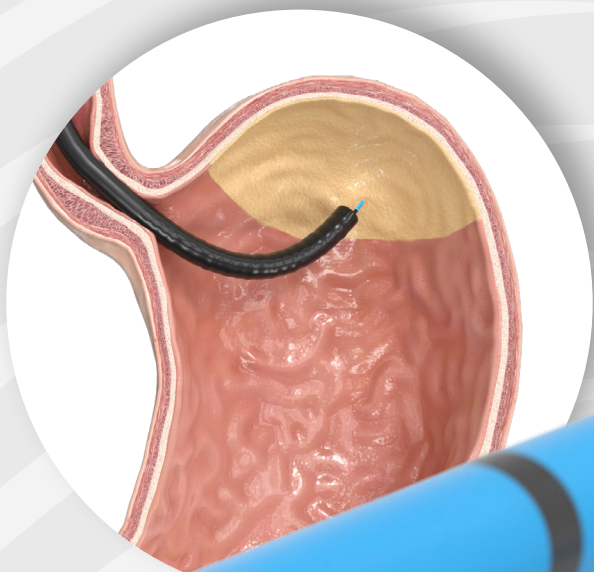

Tekniska data

Anslutning (typ)	APC 3-kontakt; vätskekontakt
Sondens diameter	2,4 mm
Sondens längd	1900 mm
Mått (elektrod)	Utstickande längd 0,75 mm; Diameter 0,7 mm
Diameter (munstycke)	120 µm
Max. elektrisk belastningskapacitet	5000 Vp
Engångs- /flergångsprodukt	Engångsbruk

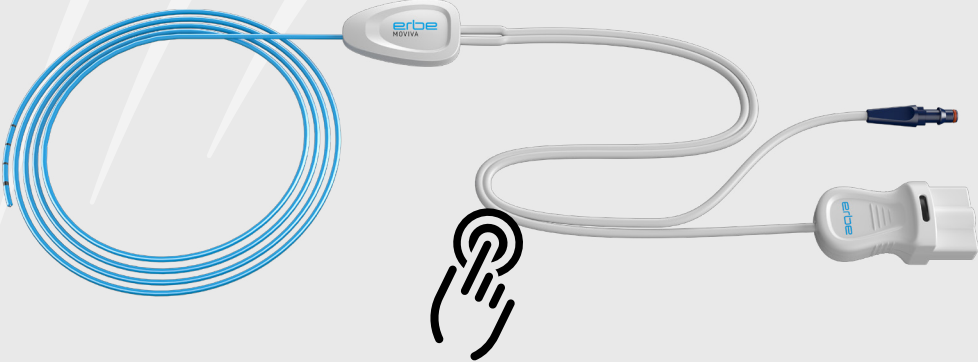

Bekämpar hungern vid källan

MOVIVA® hjälper patienterna att hålla sig till sin viktminskningsplan genom att minska antalet ghrelin*-producerande celler via ablation av slemhinnan i magens fundus, vilket i sin tur minskar hungerkänslan. Samtidigt leder ablationen till att fundus krymper. Detta bidrar till en betydande minskning av aptiten, vilket gör det lättare att äta färre kalorier.

* det så kallade hungerhormonet

Förbättra resultaten med ESG

GMA kan utföras som en fristående behandling eller i kombination med endoskopisk sleeve-gastroplastik (ESG). Att kombinera fundal-GMA med ESG ökar effektiviteten till en nivå som ligger nära VSG (vertikal sleeve-gastrektomi) med mindre invasivitet.

GMA ensamt:

7,7 % TBWL efter 6 månader i tidiga studier.*Maselli et al., 2024


7,7 % TBWL

≤ 24 % TBWL

GMA + ESG:

upp till 24 % TBWL efter 12 månader, vilket närmar sig resultaten av kirurgisk sleeve-gastrektomi men med betydligt mindre invasivitet.

*McGowan et al., 2025; Gadi et al., 2026

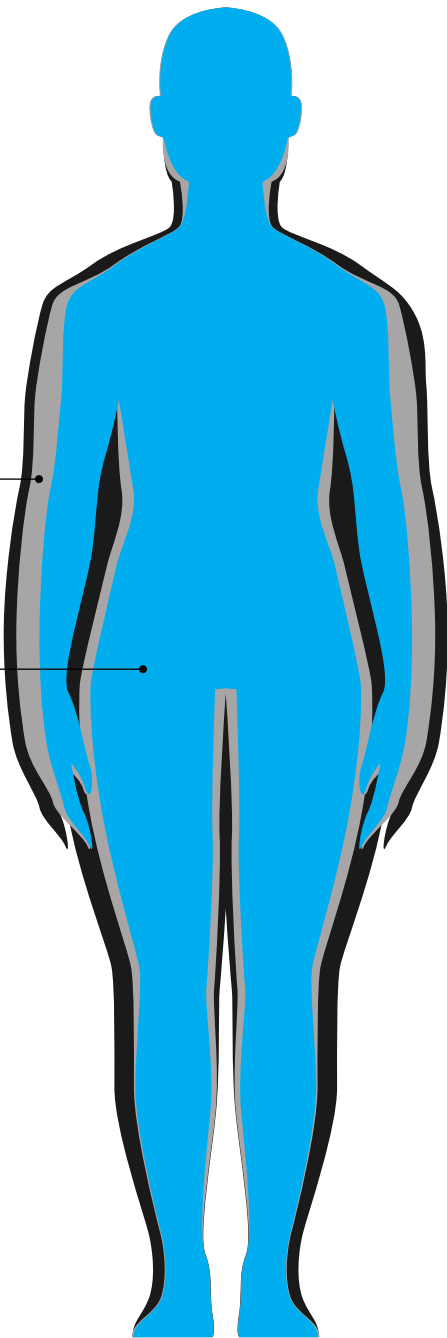

→ FÅ VETENSKAPLIG INFORMATION

Hur GMA med MOVIVA® fungerar

MOVIVA® är ett avancerat hybridinstrument utvecklat för GMA. Det kombinerar två viktiga funktioner i en och samma produkt:


Injektion av vätska för att bilda en submukosal kudde som skyddar djupare vävnadslager från värmeskador. Detta sker genom nålfri, högtrycksbaserad och vävnadsselektiv hydrodissektion.

Ytlig termisk ablation av slemhinnan med hjälp av argonplasmakoagulation (APC). MOVIVA® används med det specialutvecklade moveAPD® -läget, vilket ger en bred och jämn APC.

Steg för steg



Markering

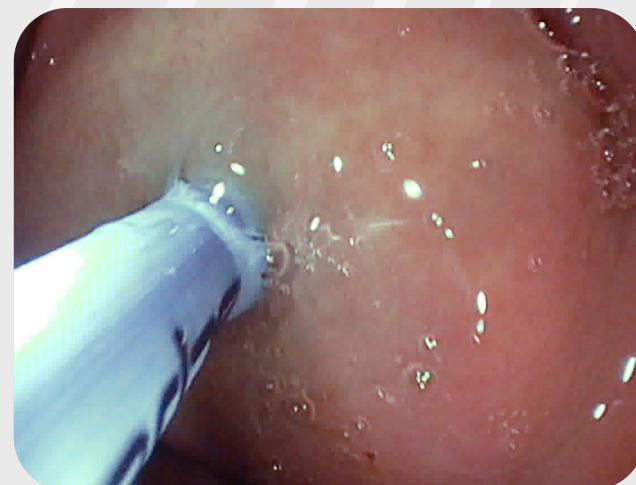

Elevation



Ablation

Dedikerat moveAPD® -läge: Snabb och effektiv koagulation

moveAPD®-läget säkerställer en jämn vävnadseffekt, i stort sett oberoende av avståndet mellan sonden och vävnaden. Med hjälp av MOVIVA® och moveAPD® möjliggörs en effektiv och snabb koagulation, även av stora områden.

→ **BESÖK VÅR WEBBPLATS FÖR VIO® 3N-SERIEN**



Förbättrade injektionsmöjligheter

En annan styrka hos MOVIVA® ligger i dess förbättrade injektionsmöjligheter, särskilt i tangentiella positioner, vilket ofta är utmanande vid endoskopiska ingrepp.

→ **BESÖK VÅR MOVIVA®-WEBBPLATS**

Påbörja din kliniska resa med MOVIVA® redan idag

Utbildningsprogrammet för MOVIVA® är utformat för att kvalificera dig som framtida behandlingsexpert, så att du kan implementera denna nya behandlingsmetod i den kliniska verksamheten. Vi erbjuder specialiserade utbildningskurser. Dessa finns tillgängliga i olika länder och regioner – hitta en nära dig.

→ **BOKA DIN KURS NU**